

# DAS SET ENTHÄLT:

Tirol Kit cod. 21-0120-023

In nur 10,8 kg

## 1 LIGHT MULE

Ultra-leichtes Einradsystem

## 4 HANDLES

Griffe für Titan T

## 2 SS-SHOULDER SUPPORT

Tragegurte

## 1 BAG TIROL KIT

Einschlussbeutel

Bedarfsgerechte Einstellung der Griffholme in **12 POSITIONEN**, Wahl zwischen langer oder kurzer Ausstattung für den sicheren Transport des Verunglückten auch unter beengten Verhältnissen.

Zum Abstellen der Trage können die Griffe als Stützbeine nach unten geklappt werden, damit der **VERUNGLÜCKTE NICHT AUF DEM BODEN LIEGEND BEHANDELT WERDEN MUSS.**

ShoulderSupport: einfach anzulegende, regulierbare Schultergurte mit Reflektorstreifen für eine bessere Gewichtsverteilung während des Transports.

## SEHR LEICHT

(Gesamtgewicht des Sets 10,8 kg), verteilbar auf mehrere Rettungskräfte und als Rucksack tragbar.

## PATENTIERTE SCHLIERE

Das gesamte Bergeset lässt sich in wenigen Sekunden auch von nur einer **Rettungskraft montieren**. Das Rad kann mit dem Verunglückten an der Trage angebracht werden.

Gemäß Richtlinie 93/42

## TITAN PROTECTION.

Spezielle Schutzbeschichtung der Korbtrage Titan-T, die hierdurch auf unterschiedlichem Gelände sicher gezogen werden kann.

TEILBARER  
UND ALS  
RÜCKSACK  
TRAGBAR

Belastungsfähigkeit  
**225 Kg**  
das leichteste  
auf dem Markt  
nur 7 Kg

Light Mule: Einrad-Gebirgstrage, bestehend aus einem V-förmigen Klapprahmen mit Fast-Clipp-Befestigungsmechanismus und einem belastungsfähigen Spezialrad für den Einsatz im Gebirge, das auch auf nicht asphaltierten Wegen hervorragende Bodenhaftung und Wendigkeit gewährleistet.


## TITANIUMKONSTRUKTION

Verschleiß- und Abriebschutz der Metallteile mit Niploy, der lange Lebensdauer gewährleistet.



## Titan-TI

- ▶ Äußerst leicht durch Konstruktion aus WIG-geschweißtem Titanium. Die Korbtrage ist nur halb so schwer wie eine Edelstahltrage.
- ▶ Die Netzbespannung aus HDPE schließt das Risiko von Rostbildung aus und gewährleistet höhere Robustheit und längere Lebensdauer.
- ▶ Das obere Rohr (25,4 mm) verbessert die Griffsicherheit und erleichtert den Transport, insbesondere über lange Strecken.
- ▶ Mit Schnellverschlussystem: Die Trage lässt sich in nur **15 Sekunden** zusammensetzen und zerlegen.
- ▶ Die „StratLoadTM“-Ösen bieten sichere Befestigungspunkte für die Abseilspinne zum Anheben der Trage. Diese Ösen garantieren die Transportsicherheit ohne Risiko von Schäden an der Konstruktion.

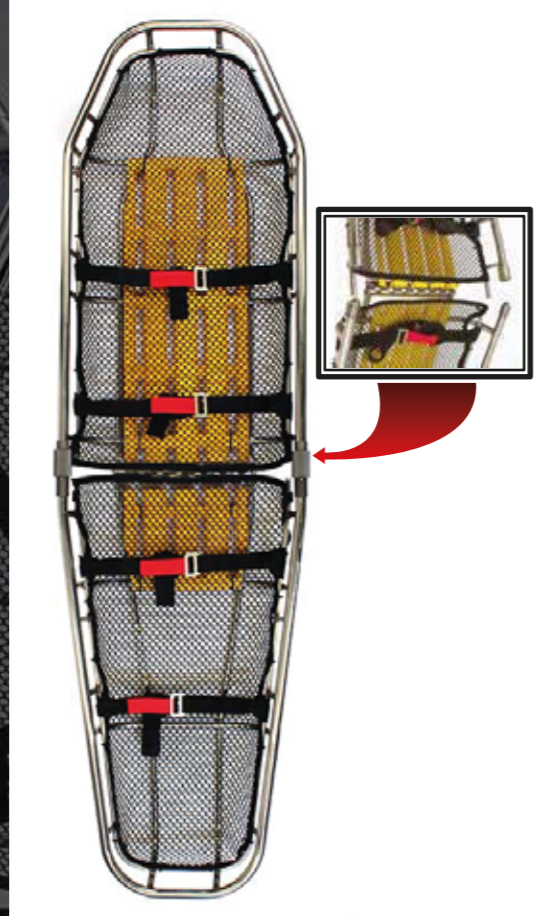

**ZERTIFIZIERUNGEN:**  
 ▶ CE CLASSIFIED  
 ▶ CERTIFIED CLASS 1



CODE	BESCHREIBUNG	BREITE	LÄNGE	TIEFE	GEWICHT	KOEFFIZIENT-LAST
11-0119TIROL	Titan TI	60 cm	212 cm	18 cm	7 kg	1134 kg

entwickelt in  
Zusammenarbeit mit:  
**Tirol  
Bergrettung**

## OPTIONALES ZUBEHÖR

Titan Protection  
cod. 21-0120-010  
Titan Protection (teilbar)  
cod. 21-0120-010\_1



Für weitere Informationen konsultieren Sie [www.ferno.it](http://www.ferno.it) [www.ferno-schweiz.ch](http://www.ferno-schweiz.ch)

Ears (Segeln Rotation)  
cod. EARS



Für weitere Informationen konsultieren Sie [www.ferno.it](http://www.ferno.it) [www.ferno-schweiz.ch](http://www.ferno-schweiz.ch)

Kleiderbügel  
cod. 15-0108 (hard)  
cod. 15-0109 (soft)



Für weitere Informationen konsultieren Sie [www.ferno.it](http://www.ferno.it) [www.ferno-schweiz.ch](http://www.ferno-schweiz.ch)

Bag Tirol Kit  
cod. BAG TIROL KIT



Für weitere Informationen konsultieren Sie [www.ferno.it](http://www.ferno.it) [www.ferno-schweiz.ch](http://www.ferno-schweiz.ch)

Schutzhülle (travers rescue)  
cod. 74000



Für weitere Informationen konsultieren Sie [www.ferno.it](http://www.ferno.it) [www.ferno-schweiz.ch](http://www.ferno-schweiz.ch)

fragen Sie uns mit  
QR CODE READER



**FERNO**  
Italia

Sede Legale e Uffici Commerciali  
Via B. Zallone n. 26  
40066 Pieve di Cento [Bo] | Italy  
P +39 051 6860028 | F +39 051 6861508  
info@ferno.it  
[www.ferno.it](http://www.ferno.it)



**FERNO**  
Schweiz

FERNO (Schweiz) AG-Alpenstrasse 12  
6302 Zug - Schweiz  
P +41 41 259 60 00  
info@ferno-schweiz.ch

[www.ferno-schweiz.ch](http://www.ferno-schweiz.ch)

Stellen Sie sich einmal vor,  
wie weit sie mit nur  
**11 Kg gehen kannst.**

**FERNO**