

Venice

Personalisierbarer Treppentragstuhl

Venice Art.-Nr. 21-0081-001

Venice Plus Art.-Nr. 21-0082-001-IT

Venice Power Art.-Nr. 21-0083-001-PRO



Ausg. 28082020

info@ferno-schweiz.ch

www.ferno-schweiz.ch

Serie Venice

Ein Stuhl, der beliebig angepasst werden kann, um den Patiententransport zu erleichtern.

Mit der Linie Venice können Sie Ihren Treppentragstuhl frei selbst gestalten. Sie können ihn mit dem gewünschten Zubehör personalisieren, das wir ad-hoc für diese Einrichtung realisiert haben. Oder Sie wählen eine der von uns bereitgestellten Zusammenstellungen:

VENICE, ultraleicht;

VENICE PLUS, mit dem innovativen mechanischen Raupensystem mit regulierbarer Bremse;

VENICE POWER, mit motorisiertem Raupensystem.

Alle Versionen sind konfigurierbar, auch noch nach dem Kauf - beliebig konfigurierbar.

Die Linie Venice gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihren Stuhl jederzeit auf den neusten Stand zu bringen.

PLUSPUNKTE DES STUHLS VENICE

Ist personalisierbar. Sie können den Stuhl mit allen nachstehenden Zubehörteilen konfigurieren:

Fußstütze, Kit regulierbare Beinauflage, Kopfstütze, Kit Armlehnen, Verriegelung VeniceClack (zertifiziert 10G und UNI EN 1789), Kit schmale Räder, Kit kurze Griffe, Kit Motorisierung.

Ist leicht und beweglich. Der Leichteste auf dem Markt: seine Struktur wiegt nur **9,8 kg**. Dank seiner Ausstattung kann dieser Stuhl in jedem Umfeld bequem und praktisch eingesetzt werden.

Hat ein kompaktes Format. Erfordert im Krankenwagen nur einen Platz von 20 cm Tiefe.

Bietet eine hohe Tragfähigkeit. Er kann mit bis zu **230 kg** beladen werden und eignet sich auch für den Transport bariatrischer Patienten.

Ist Zuverlässig. Verfügt über Systeme, die nicht nur dem Patienten sondern auch Ihnen während der Handhabung und des Transports Sicherheit und Komfort gewährleisten. Seine Sicherheit wird von der Zertifizierung nach UNI EN 1865 bescheinigt. Die Verriegelung ist gemäß den geltenden Richtlinien 10G zertifiziert.

Personalisieren Sie ihn mit den Zubehörteilen

VERSTELLBARE ARMLEHNEN



Die verstellbaren Armlehnen garantieren durch ihre zahlreichen Positionen auch beim Transport von bariatrischen Patienten einen extremen Komfort.

FUSSSTÜTZE



Bequemer und effizienter Transport? Die Fußstütze bietet wesentliche Unterstützung. Die Konstruktion aus Aluminiumlegierung macht sie extrem robust.

Darüber hinaus ist sie leicht verschließbar: Die Stützen am Venice verhindern ein versehentliches Öffnen.

Serie Venice

AUSZIEHBARER GRIFF




Sein Vorteil? Der Haupt-Rettungshelfer kann während der Handhabung eine korrekte Körperhaltung bewahren.

Er ist auf mehrere Positionen höhenverstellbar, um Sie beim Transport der Patienten, beim Auf- und Abstieg auf Treppen zu unterstützen.

Die Entwicklung des neuen Griffs führte zudem zu einer ergonomischen Form, die unter allen Bedingungen einen optimalen Halt mit hoher Griffsicherheit garantiert.

ÜBERGROSSE RÄDER

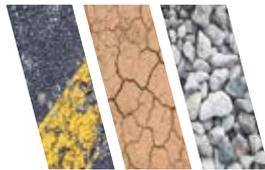

Kies, Asphalt, Rasen, Schotter... Die übergroßen Hinterräder ermöglichen es Ihnen, den Stuhl Venice auf jeder Art von Untergrund zu bewegen, für einen sicheren und schnellen Transport.

Ein Verdienst der Übergröße mit einem Durchmesser von 200 mm mit hoher Bodenhaftung.

2 ARTEN VON TRANSPORTGRIFFEN



Welcher Griff ist am besten geeignet? Venice ermöglicht es Ihnen, zwischen zwei Arten von Griffen zu wählen, je nach der von den Rettungshelfern festgelegten Transportweise. Die Griffe sind für alle Arten von Bewegungen geeignet und können bei Nichtgebrauch einklappen werden.

KOPFSTÜTZE



Wenn Ihr Tragstuhl Venice mit einem ausziehbaren hinteren Griff ausgestattet ist, können Sie den Patientenkomfort beim Transport mit dieser Kopfstütze noch weiter verbessern.

Sie lässt sich mit den Klettbindern schnell anlegen und stützt den Kopf des Patienten.

Dank der praktischen Tasche, die mit der Kopfstütze geliefert wird, kann sie im hinteren Teil des Sitzes untergebracht und bei Bedarf schnell montiert werden.

Die Kopfstütze ist atmungsaktiv und waschbar.

MANUELLE RAUPE - KEEP CONTROL



Manövrierfähigkeit und Sicherheit: Die Raupenschiene kann der Stuhl bequem über die Treppen gleiten, wobei der Kraftaufwand des Rettungshelfers reduziert und die Stabilität des Patienten erhöht werden.

Die neue mechanische Raupe „Keep Control“ wurde entwickelt, um die Bodenhaftung auf den Treppenstufen zu erhöhen. Darüber hinaus ist sie dank eines Drehknopfes, der die Raupenspannung reguliert, als einzige in der Lage, die Abstiegs geschwindigkeit auf der Treppe zu steuern.

Mit diesem einfachen Handgriff können Sie die geeignete und sichere Geschwindigkeit in Abhängigkeit vom Patientengewicht oder von der Steigung der Treppe wählen.

Serie Venice

MOTORISIERTE RAUPE



Zu wenig Platz? Mit der kurzen Raupe ist Venice wendiger, selbst auf kleinstem Raum. Die verringerte Auflagefläche der Raupe reduziert die Rutschgefahr.

Die Raupenschiene verfügt auch über eine Rille, die speziell entwickelt wurde, um eine höhere Bodenhaftung zu garantieren: Mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit!

Zur motorisierten Raupe gehören:

- Stoßfestes, wasserfestes und staubdichtes, verstärktes Wi-Fi Bedienteil;
- die im motorisierten System eingebaute Sicherheitsleuchte, die auch bei widrigen Lichtverhältnissen beste Sicht garantiert;
- Milwaukee-Akku mit verlängerter Betriebsdauer: Ein vollgeladener Akku sichert den Betrieb für mehr als einen Tag.

Nicht nur Zubehör...

Die Serie Venice hat auch folgende Stärken:

- AS-System: - Das patentierte AS-System von Ferno garantiert die Festigkeit des Stuhls auch nach vielen Einsatzstunden.
- Vordere, verlängerbare und in 5 Positionen verstellbare Griffe.
- Aufbewahrung auf nur 20 cm: dank des Sperrsystems Venice Clack und des magnetischen Verschlusses der Vorderräder in geschlossener Position.



Serie Venice

TECHNISCHE DATEN DES TRAGSTUHLIS VENICE BASIS

21-0081-001



Tragfähigkeit	230 kg	507 lbs
Gewicht	9,9 kg	22 lbs

Zusammengeklappter Tragstuhl

Breite	510 mm	20.1 in
Höhe	860 mm	33.9 in
Tiefe	305 mm	12 in

Aufgeklappter Tragstuhl

Breite	510 mm	20.1 in
Höhe	860 mm	33.9 in
Tiefe	735 mm	28.9 in

TECHNISCHE DATEN DES TRAGSTUHLIS VENICE PLUS

21-0082-001-IT



Tragfähigkeit	230 kg	507 lbs
Gewicht	15,8 kg	31 lbs

Zusammengeklappter Tragstuhl

Breite	510 mm	20.1 in
Höhe	908 mm	35.7 in
Tiefe	292 mm	11.5 in

Aufgeklappter Tragstuhl

Breite	510 mm	20.1 in
Höhe	908 mm	35.7 in
Tiefe	763 mm	30 in

Serie Venice

TECHNISCHE DATEN DES TRAGSTUHLS VENICE POWER

21-0083-001-PRO



Tragfähigkeit	230 kg	507 lbs
Gewicht	22 kg	48,5 lbs

Zusammengeklappter Tragstuhl

Breite	540 mm	21.3 in
Höhe	920 mm	36.2 in
Tiefe	230 mm	9.1 in

Aufgeklappter Tragstuhl

Breite	540 mm	21.3 in
Höhe	920 mm	36.2 in
Tiefe	770 mm	30.3 in

Venice