

STBC è pensata per la movimentazione di pazienti infetti con patogeni contagiosi di classe III (SARS-COVID virus).



INSTALLAZIONE RAPIDA

Installabile su qualsiasi barella Ferno, con STBC il paziente non esce mai dalla camera di protezione, grazie ai bloccaggi ITC®. Non servono modifiche alla tua barella.



APERTURA RAPIDA

La cerniera laterale agevola le operazioni di soccorso, permette il posizionamento rapido del paziente con la massima semplicità.



TESTATO 10G

Il sistema di ancoraggio al telaio di STBC è a norma EN1789:2020 ed è stato testato con crash-test a 10G. Paziente e soccorritori possono viaggiare sicuri.



PLASTICHE SENZA FTALATI

STBC rispetta la salute perché tutte le plastiche sono senza ftalati.



BOCCHETTONI ACCESSO RAPIDO

STBC è pensata per garantire comfort e sollievo al paziente con dispnea respiratoria: 8 bocchettone garantiscono qualsiasi operazione da effettuare in viaggio sul paziente.



POSIZIONE SEMI SEDUTA

Lo schienale reclinabile in posizione semiseduta è un utile supporto alle funzioni respiratorie del paziente.



FILTRI HEPA

Filtri HEPA facilmente reperibili e a basso costo.



VISTA INTERNA



PASSACAVO A TENUTA PER MONITOR



CINTURE FISSATE ALLA STRUTTURA



GRUPPO SOFFIANTE

Con controllo temperatura, flusso, pressione e percentuale di ossigeno

Sistema di facile rimozione e manovrabilità in caso di emergenza

RISPETTA LE DIMENSIONI DEL PIANO BARELLA

POSIZIONE SEMI SEDUTA


Senza far uscire il paziente dalla camera di protezione

ALTA VISIBILITÀ

COMFORT
con supporto alle vie respiratorie durante il trasporto



MANIGLIE DI TRASPORTO

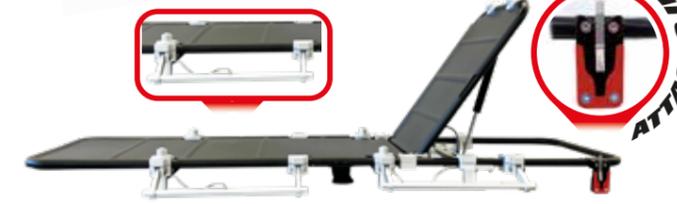

Interfaccia inferiore utilizzabile come barellino removibile e compatibile con le barelle Ferno.



STBC COMPRENDE:

- N°6 Filtri Dräger A2B2 P3 R 99,9% (CE0158)
- N°2 Guanti integra 100 (CE0197)
- N°1 Camera in PVC
- N°1 Gruppo soffiante
- N°1 Alimentatore ausiliario 80-264V
- N°1 Set di cinture a 4 punti
- N°2 Tubi di collegamento
- N°2 Batterie ricaricabili: 2x 28V
- N°1 Caricatore delle batterie 230V
- N°1 Barellino

COMPATIBILE CON TUTTE LE BARELLE FERNO



CERTIFICAZIONI

GRUPPO SOFFIANTE : EN 60601-1-2:2015 (EMC) BARELLINO : EN 1789 : 2020 (10G) CAMERA : ISO 10993-1 : 2020 (BIOCOMPATIBILITÀ)
EN 60601-1:2006/A2:2021 (SICUREZZA ELETTRICA) EN 62366-1:2015 (USABILITÀ)

STBC
FERNO

STBC
FERNO

Specifiche Tecniche

Lunghezza	1900 mm
Larghezza	600 mm
Altezza	620 mm
Altezza max con schienale sollevato	900 mm
Portata massima	180 kg
Peso struttura completa	35 kg
Dimensione involucro stoccaggio camera	700 x 650 x 260 mm
Rumore interno camera	< 80 dB
Alimentazione (batteria o rete)	Batteria 28 V / 5 Ah o 110/220 V
Durata delle batterie	4 ore in pressione negativa a 20 Pa*
Flusso aria soffiante	16 m ³ /h
Ricambio Aria	> 20 volte per ora
Volume camera protezione	0,72 m ³
Filtri	Filtrazione 99,9 % EN 143 : 2007- UE 2016/425

Certificazioni

CE Secondo regolamento 2017/745 come dispositivo medico di classe I

Gruppo soffiante : EN 60601-1-2:2015 (EMC)
Barellino : EN 1789 : 2020 (10G)
Camera : ISO 10993-1 : 2020 (BIOCOMPATIBILITÀ)
EN 60601-1:2006/A2:2021 (SICUREZZA ELETTRICA)
EN 62366-1:2015 (USABILITÀ)

* POSSIBILITÀ DI ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA

FERNO

Sede Legale e Uffici Commerciali
Via B. Zallone n. 26
40066 Pieve di Cento [Bo] | Italy
P +39 051 6860028 | F +39 051 6861508
info@ferno.it

STBC
SISTEMA DI TRASPORTO DI BIO CONTENIMENTO



STBC
FERNO

FERNO