

# Venice

*Sie haben die  
freie Wahl*

 **FERNO**

*Italy*  
P +39 051 6860028  
F +39 051 6861508  
info@ferno.it

[www.ferno.it](http://www.ferno.it)

Numero Verde  
800 501711

*Schweiz*  
P +41 41 259 60 00  
info@ferno-schweiz.ch

[www.ferno-schweiz.ch](http://www.ferno-schweiz.ch)

 **FERNO**




+ Gesamtgewicht  
**9,8 KG**  
 + Belastbarkeit  
**230KG**


# Venice

Der Treppenrollstuhl Venice gehört zu den leichtesten auf dem Markt, er wiegt nur 9,8 kg. Mit zahlreichem Zubehör ist er darauf ausgelegt, dass ihn jeder nach seinen Anforderungen personalisieren kann.


+  
 +

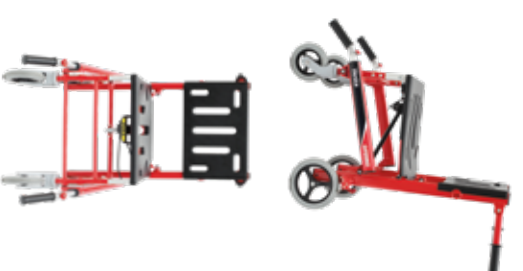

+ ZERTIFIZIERT  
**EN 1865**

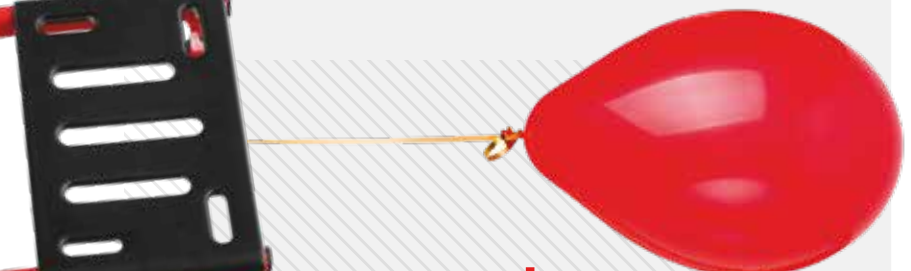

+ HALTERUNG  
 zertifiziert  
**EN1789  
 10C**

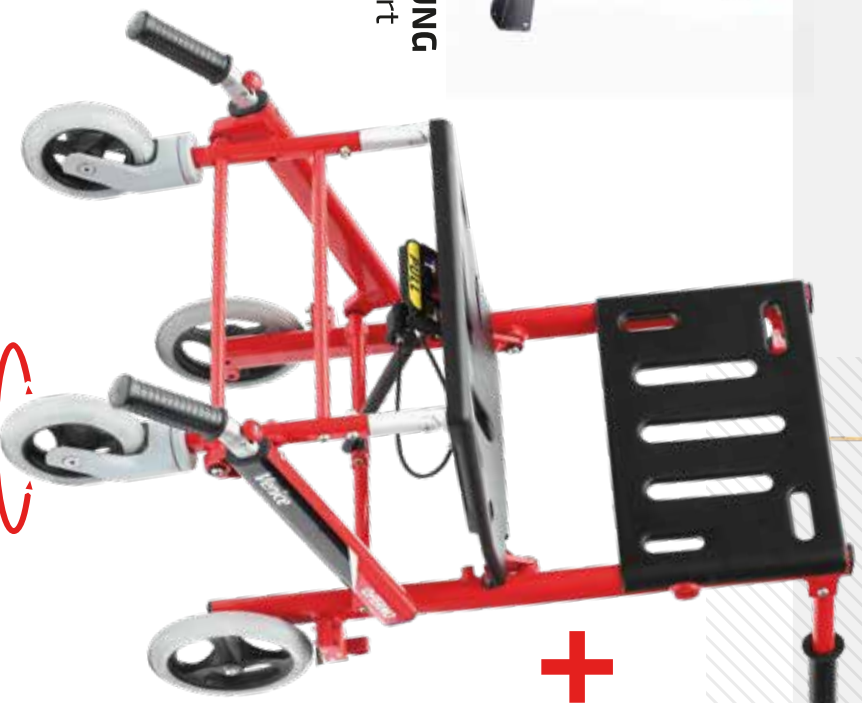

Vorderräder **frei drehbar**



+ Breite  
 zusammengeklappt  
**20 cm**



+ Vordergriffe **verlängerbar**



+ **Magnetisch** festgehaltene Räder

# ZUBEHÖR

+ System **ASH**<sup>®</sup>  
 Das von Ferno patentierte System AS stellt sicher, dass der Treppenrollstuhl auch nach zahlreichen Einsatzstunden unter allen Bedingungen äußerst kompakt ist.



+ Lenkgriff **ausziehbar**

+ Raupe  
**per Hand verstellbar**  
 Die technische Realisierung der Raupe gestattet das Hinabsteigen von Treppen in völliger Sicherheit, zur Unterstützung des Sanitäters.




+ Räder **vergrößert**

Dank der neuen größeren Räder mit 200 mm Durchmesser und starker Bodenhaftung lässt sich der Treppenrollstuhl Venice auf allen Oberflächen im Außen- und Innenbereich bewegen und garantiert einen sicheren und schnellen Transport.



+ 2 Arten von **Handgriffen**

Je nach der von den Sanitätern gewählten Transportart stehen zwei verschiedene Handgriffe zur Wahl.

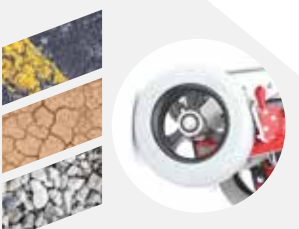

+ **Bedienteil**

Das Bedienteil gewährleistet den Einsatz auch unter extremen Temperaturbedingungen. Die Geschwindigkeit lässt sich mit Drucktasten regulieren, je nach ausgeübtem Druck kann die Geschwindigkeit angepasst werden.



**WIFI**




+ **Licht**

Die integrierte Leuchte gewährleistet dem Sanitäter bessere Sichtbarkeit bei mangelhafter Beleuchtung.



+ Armlehnen **verstellbar**

Die in mehrere Positionen verstellbaren Armlehnen garantieren auch beim Transport schwergewichtiger Patienten höchsten Komfort.

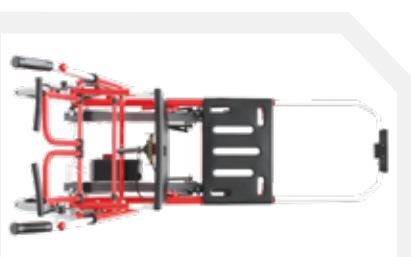


+ **Beinauflage**

Die Beinauflage ist höhen- und längenverstellbar und bietet somit eine ausgezeichnete, an jede Gegebenheit anpassbare Abstützung.



Die Beinauflage ist für einen komfortablen und sicheren Transport auch als Fußstütze einsetzbar.

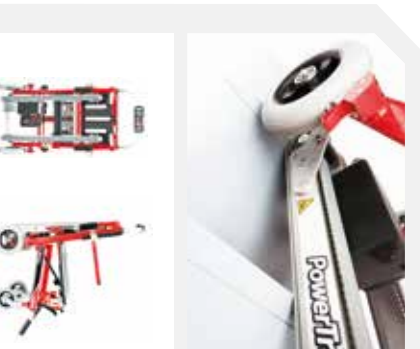

+ Raupe **motorisiert**  
 Dank der kurzen Raupe ist der Treppenrollstuhl Venice auch auf engstem Raum sehr wendig. Die geringere Auflagefläche verringert die Möglichkeit des Ausrutschens; die Verarbeitung des Gleitstücks weist eine besondere Verankerung auf, in der die Raupe fest verankert bleibt, wodurch größere Sicherheit und Zuverlässigkeit gewährleistet sind.

+ Kompatibel mit **Monorudder**

Mit dem Monorudder können Tragstühle ohne Raupe in 3 einfachen Schritten motorisiert werden:  
**1+** Anheben  
**2+** Koppeln  
**3+** Das Gerät in Richtung der Rückenlehne des Tragstuhls andrücken



+ **2 JAHRE**  
 GARANTIE