

+ peso totale
9,8KG
+ capacità di carico
230KG

Venice

La Sedia Venice è tra le più leggere sul mercato, pesa solo 9,8 Kg. Progettata perché tutti possano personalizzarla secondo le proprie esigenze, grazie alla vasta gamma di accessori.

+
+




+ **CERTIFICATA**
EN 1865



+ chiusa in
20 cm



+ **BLOCCAGGIO**
certificato
EN1789
10C

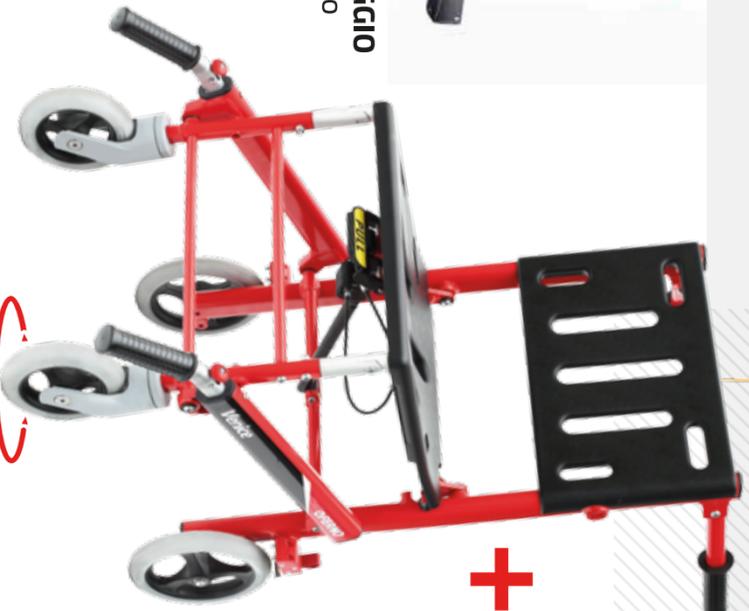

ruote anteriori
piroettanti



+ chiusura ruote
magnetica



ACCESSORI

+ maniglione
estendibile



+ sistema **AS H**
Il sistema AS brevettato da Ferno, garantisce una compattezza della sedia anche dopo numerose ore di lavoro in qualsiasi tipo di condizione.



+ cingolo
manuale

La realizzazione del cingolo permette la discesa delle scale in totale sicurezza a supporto dell'operatore.



retroilluminata



+ scatola di comando
La scatola di comando garantisce l'utilizzo anche in condizioni di temperatura più estreme. La velocità è modulabile grazie ai comandi a pressione che permettono di regolare la velocità a seconda della forza esercitata sul pulsante.



+ **luce**

Luca
integrata
garantisce
maggior
visibilità
all'operatore
in situazione
di scarsa
luminosità.

+ 2 tipi di
maniglie

Possibilità di scegliere tra due tipi di maniglie a seconda della modalità di trasporto scelta dagli operatori.



+ ruota
maggiorata

Grazie alle nuove ruote maggiorate con diametro di 200 millimetri ad alto grip, è possibile utilizzare la sedia Venice su qualsiasi tipo di superficie sia indoor che outdoor, garantendo un trasporto sicuro e veloce.




+ braccioli
regolabili

I braccioli regolabili garantiscono un estremo comfort anche durante il trasporto di pazienti bariatrici grazie alle molteplici posizioni.



+ **poggiagamba**

Il poggiagamba permette di essere regolato in altezza e in lunghezza per ottenere un supporto ottimale adattabile ad ogni evenienza. Il poggiagamba è utilizzabile anche come poggiatesta per un trasporto confortevole e sicuro.

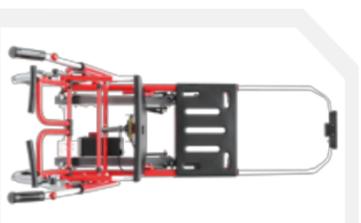

+ compatibile con
monorudder

Con Monorudder è possibile motorizzare sedie portantine prive di cingolo in 3 semplici passaggi:

- 1 + Sollevare
- 2 + Agganciare
- 3 + Premere il dispositivo verso lo schienale della sedia



+ cingolo
motorizzato

Grazie al cingolo corto, la sedia Venice risulta più maneggevole anche in spazi ristretti. La minore superficie di appoggio riduce la possibilità di scivolamento, inoltre la lavorazione del pattino presenta una scanalatura particolare, che permette al cingolo di rimanere saldamente ancorato, garantendone così maggior sicurezza e affidabilità.



+ **2**
GARANZIA
ANNI

Venice

Liberi di scegliere

Numero Verde
800 501711

visita il nostro nuovo sito!
www.ferno.it

 **FERNO**

Sede Legale e Uffici Commerciali
Via B. Zallone n. 26
40066 Pieve di Cento [Bo] | Italy
P +39 051 6860028 | F +39 051 6861508
info@ferno.it

 **FERNO**