


# 71

*Barella Toboga*



# TOBOGA 71

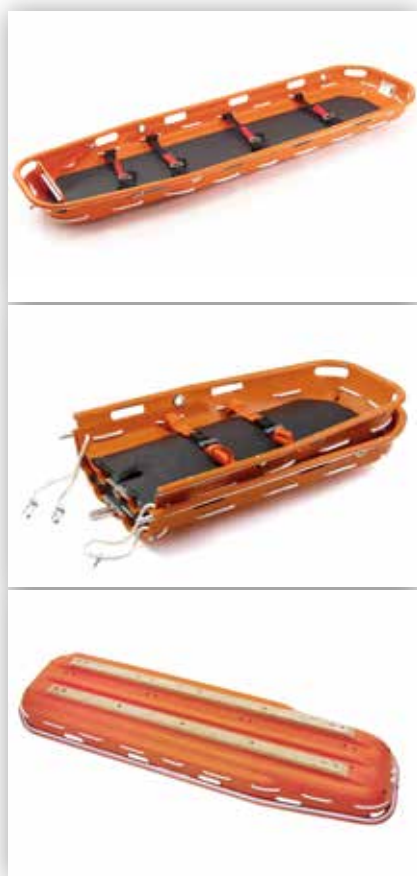

Realizzata specificatamente per il soccorso tecnico, alpino, sciistico e per la ricerca, sia terrestre che navale.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Il guscio in polietilene ad alta densità conferisce alla barella Toboga 71 elevata resistenza agli agenti chimici, ai raggi UV, alla corrosione e alla formazione di ruggine, rendendola ideale per l'utilizzo su qualunque tipologia di terreno in qualsiasi condizione.
- Le maniglie e i pattini sono modellati nella struttura tubulare di alluminio.
- La forma della barella consente di proteggere il paziente da eventuali urti laterali e di contenere materiale per l'immobilizzazione.
- E' dotata di un materassino in schiuma a celle chiuse, una corda passante su tutto il perimetro della barella per l'aggancio delle cinture e quattro punti di ancoraggio per il sollevamento della barella tramite sospensioni.
- Nella parte posteriore sono presenti due pattini che favoriscono il trascinamento sul terreno.
- Disponibile nei modelli: unica (71), divisibile (71-S) e unica non metallica (71-M). I modelli sono completi di 4 cinture di sicurezza per paziente.
- Nella versione divisibile, 71-S, la barella occupa il minimo spazio e può essere trasportata agevolmente in zone impervie.
- La versione unica, non metallica, 71-M, è stata realizzata specificatamente per l'utilizzo in situazioni in cui è necessaria la protezione da rischi elettrostatici: sottopassaggi, metropolitane, miniere, navi, centrali elettriche, gallerie grisutose. La struttura in alluminio con rivestimento plastico, i pattini in legno e le cinture con chiusura in velcro garantiscono l'isolamento elettrico necessario per un utilizzo in sicurezza della barella.

## SPECIFICHE TECNICHE

71 / 71-S	
Lunghezza	2180 mm
Larghezza	610 mm
Profondità	190 mm
Peso	10 kg
Capacità di carico	272 kg
71-M	
Lunghezza	2180 mm
Larghezza	610 mm
Profondità	250 mm
Peso	10 kg
Capacità di carico	272 kg



# TOBOGA 71

## MODELLI DISPONIBILI

Codice	Descrizione
0107100	Barella Toboga 71 unica, con 4 cinture incluse
0107101	Barella Toboga 71-S divisibile, con 4 cinture incluse
0107104	Barella Toboga 71-M unica, non metallica, con 4 cinture incluse

## ACCESSORI OPZIONALI

Descrizione	Codice
Sospensioni modello 418-1 regolabili con moschettoni	0312390
Portaflebo 513-4 per barella 71 e 71-S	0085480
Galleggiante Flotation Collar	0313943
Custodia 387-A per barella 71	0311800
Custodia 387-B per barella 71-S	0311820



 **FERNO**<sup>®</sup>  
*When It's Critical*<sup>®</sup>



Numero Verde  
800 501711

[www.ferno.it](http://www.ferno.it)