

# MONDIAL<sup>®</sup> Monobloc

*Sistema di trasporto*



# MONDIAL® Monobloc

**FERNO®**  
When It's Critical®



Grazie alla tecnologia Smart-Load™ System Ferno Mondial® Monobloc garantisce efficienza, semplicità ed ergonomia durante le fasi di caricamento e di scaricamento dall'ambulanza, sollevamento e abbassamento del sistema di trasporto.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Assoluta efficienza, semplicità e ergonomia nelle procedure di caricamento e scaricamento grazie all'esclusivo sistema EZ Load™ Auto-Release System.
- Riduzione dello sforzo e garanzia di una posizione corretta ed ergonomica per l'operatore grazie alla maniglia EZ Pull™ Release Handle.
- Maniglie telescopiche per una totale ergonomia durante il sollevamento e il trasporto della barella.
- Possibilità di aiuto addizionale da parte di più operatori grazie alle maniglie telescopiche laterali.
- I comandi con codice colore garantiscono un utilizzo facile ed intuitivo.
- L'indicatore visivo (verde/rosso) segnala automaticamente l'avvenuto bloccaggio delle gambe.
- Eccellente trasportabilità su tutti i tipi di terreno grazie alle ruote da 150 mm e sicurezza grazie alle ruote posteriori dotate di sistema di freno integrato.
- Massima manovrabilità in spazi ristretti grazie alla leva di sblocco che consente alle ruote di ruotare liberamente di 360°.
- 6 posizioni regolabili in altezza.
- Visibilità notturna grazie alle etichette riflettenti.
- La barella Mondial Monobloc è completa di sistema di cinture paziente.
- Conformità alle Norme EN1865 e EN1789.

## SPECIFICHE TECNICHE

	<b>MB64</b>	<b>MB70</b>
Lunghezza	1970 mm	1970 mm
Larghezza	550 mm	550 mm
Altezza		
Posizione 1	318 mm	314 mm
Posizione 2	522 mm	562 mm
Posizione 3	708 mm	749 mm
Posizione 4	819 mm	867 mm
Posizione 5	892 mm	946 mm
Posizione 6	949 mm	1007 mm
Altezza di caricamento	670-730 mm	740-790 mm
Peso	45 kg	45 kg
Capacità di carico	280 kg	280 kg

# MONDIAL® Monobloc

**FERNO®**  
When It's Critical®



## Maniglia di controllo gambe EZPull™

Consente di sbloccare le gambe anteriori e posteriori prima di abbassare o caricare la barella in ambulanza.



## Ruote posteriori

Sono dotate di un sistema di freno integrato, facilmente accessibile e individuabile dall'operatore.



## Indicatore di stato gambe

Segnala automaticamente l'avvenuto bloccaggio e sbloccaggio delle gambe:

- indicatore verde: bloccate
- indicatore rosso: sbloccate e pronte per l'abbassamento e il caricamento.



## Due sistemi di sblocco automatico gambe EZ Load™

Lato caricamento: il sistema collegato alle ruote di caricamento sblocca automaticamente le gambe sul lato di caricamento in modo da facilitare il caricamento in ambulanza.

Lato controllo operatore: grazie a tale sistema non è necessario utilizzare nessuna maniglia di controllo per caricare la barella in ambulanza.



## Leva di sblocco ruote

Consente alle ruote anteriori di ruotare liberamente di 360°.



**Spondine abbattibili e posizionabili in 3 differenti posizioni** grazie all'apposito pulsante.



## Sistema di sicurezza anticaduta

Elimina il rischio di scaricamento accidentale dall'ambulanza prima che le gambe sul lato di caricamento si siano aperte e bloccate correttamente.



## Schienale regolabile

Possibilità di regolazione della sezione testa in tre posizioni per la gestione delle vie aeree e poggiatesta estendibile.



## Telaio antishock

Consente di porre il paziente nella posizione antishock sollevando semplicemente la sezione piedi tramite le apposite cinghie laterali di sollevamento.




Numero Verde  
**800 501711**

[www.ferno.it](http://www.ferno.it)

# MONDIAL® Monobloc

**FERNO®**  
When It's Critical®

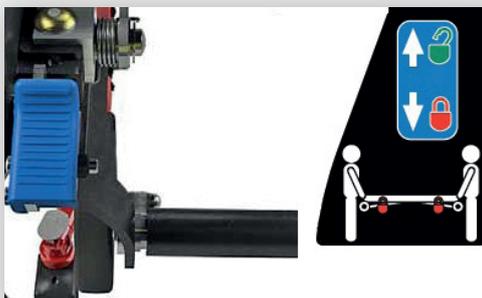

## Sistema bloccagambe

Permette agli operatori di sollevare e trasportare la barella come una portantina, bloccando in sicurezza le gambe durante il sollevamento.




**Maniglie telescopiche estraibili ed allungabili** in 3 posizioni tramite l'apposito pulsante.



**Ruote intermedie di carico** Facilitano il caricamento o lo scaricamento della barella dall'ambulanza.



**Maniglie telescopiche estraibili lateralmente** per consentire l'aiuto addizionale da parte di più operatori.

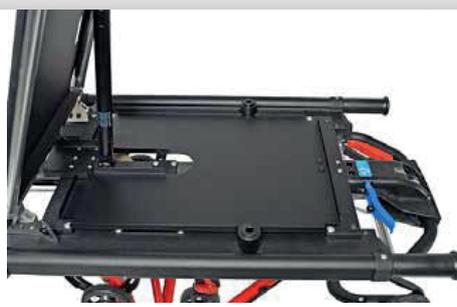

**Vano portaoggetti** posizionato sotto lo schienale.



**Poggiapiedi** per un maggior comfort del paziente.

## ACCESSORI OPZIONALI

Descrizione	Codice
Materasso a sezioni, nero	0374874
513-EFX asta portaflebo	0832024
514 OXY-CLIP portabombola per spondina removibile	0085500
Sistema di bloccaggio FL1	0573080

## MODELLI DISPONIBILI

Codice	Descrizione
0054258	Mondial Monobloc - Barella multilivello Smart-Load , altezza 64 cm, rossa, OP2 (sistema anticaduta e cinture incluse)