

XT

Extractionsboard



XT

XT Artikel-Nr. Kit XT PLUS-B

ENTHÄLT: 1 Board aus Kohlefaser, 1 Set klassische Gurte, 1 QHI, 1 Transporttasche,
1 Set Halsstützen Wiz Loc (3 Stck.), 1 dreieckige Kopffixierung

XT Artikel-Nr. Kit XT PLUS-B



1 XT BOARD AUS KOHLEFASER
Artikel-Nr. 10-1600-001



1 SET KLASSISCHE GURTE
Artikel-Nr. Gelbe Schnalle. 10-1602-002
Artikel-Nr. Schwarze Schnalle. 10-1604-002
Artikel-Nr. Grüne Schnalle. 10-1603-002
Artikel-Nr. Rote Schnalle. 10-1601-002



**1 QHI, 1 DREIECKIGE KOPFFIXIERUNG,
1 BAND AUS NEOPREN**
Artikel-Nr. QHI-B



1 TRANSPORTSACK XT
Artikel-Nr. 10-1605-001



3 STÜTZKRAGEN WIZ LOC
Artikel-Nr. 0822074



XT

Ferno XT: Verkürzte Einsatzzeiten. Kann von jedem Sanitäter dank der Einfachheit und Geschwindigkeit der Anwendung verwendet werden. Ermöglicht die vollständige Immobilisierung der Halswirbelsäule. Maximale Leichtigkeit und Transportfähigkeit.

HAUPTMERKMALE

- Konzipiert für die sichere Wirbelsäule-Immobilisierung und die sichere **Extrikation von Patienten aus Fahrzeugen oder engen Bereichen**.
- Dank der Kits Pro und Floating kann es für die technische Rettung in unwegsamem Gelände (Wasser und Gebirge) verwendet werden.
- Entwickelt, um eine sichere **schnelle** und **vorbeugende Extrikation** auf für den Sanitäter sichere Weise zu ermöglichen.
- Die **4 Sicherheitsgurte**, zwei Brustgurte in überkreuzter Konfiguration, und zwei Leistengurte ermöglichen es, den Patienten ohne Kompressionen zu immobilisieren und maximalen Komfort und Sicherheit zu garantieren. Die Gurtschnallen weisen verschiedene Farben auf und ermöglichen eine sofortige Identifizierung und schnelle Anwendung.
- Die **4 roten Hebe- und Transportgriffschlaufen** bieten den Sanitätern eine feste und ergonomische Griffmöglichkeit, um eine effizientere Extrikation des Patienten zu ermöglichen.
- Die **QHI-B Kopffixierung** garantiert dem Sanitäter eine effiziente Immobilisierung des Schädels und der Halswirbelsäule des Patienten durch die Kombination mit der dreieckigen Kopffixierung aus Neopren.
- Maximale Leichtigkeit dank der Kohleverbundfaser-Struktur.
- Stets einsatzbereit und in einer praktischen Transporttasche transportierbar.
- Einfach zu desinfizieren.
- Kompatibel mit atraumatischen Krankentragen, Backboards und Vakuummatratzen.

NATO NUMBER:

XT COMPLETE-B

6530150200590

XT PRO

6530150200591

XT FLOATING

6530150200592

WICHTIG: Wenn Sie bereits ein XT haben, können Sie es dank des speziellen Kits auf die PRO-Version nachrüsten.

XT Pro Artikel-Nr. XT PRO

ENTHÄLT: 1 Board aus Kohlefaser, 1 Kit Pro, 1 QHI,
1 Transportsack, 1 dreieckige Kopffixierung.

Das Kit Human Lift ermöglicht die vertikale Bergung bei engen Gegebenheiten. Die Vorrichtung bewahrt die korrekte Haltung des Patienten auf der Bergungslinie und erfordert erheblich weniger den Platz für die Bewegungen. Die schnelle Konfiguration ist durch das einzelne Band gewährleistet, das die Hebung des Patienten erleichtert. Die QHI-B Kopffixierung ermöglicht dem Sanitärer eine effektive Fixierung des Schädels und der Halswirbelsäule des Patienten.



XT Artikel-Nr. XT PRO



1 XT BOARD AUS KOHLEFASER
Artikel-Nr. 10-1600-001



1 KIT PRO
4 Gurte mit Schnalle Cobra,
2 Bewegungsringe,
2 Polsterungen für Beingurte,
1 Karabinerhaken,
1 Hebeband
Artikel-Nr. KIT PRO





1 TRANSPORTSACK XT
Artikel-Nr. 10-1605-001



**1 QHI, 1 DREIECKIGE KOPFFIXIERUNG,
1 BAND AUS NEOPREN**
Artikel-Nr. QHI-B-N

Human LIFT

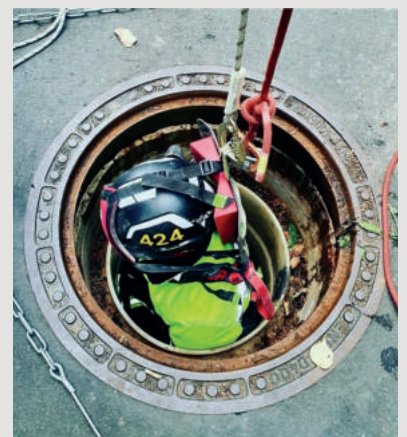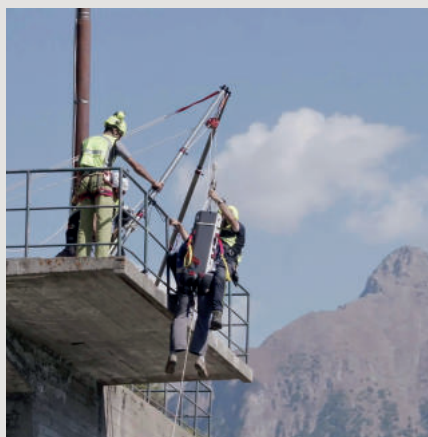

- Gurtsystem, gemäß EN1498 getestet
- Gurte mit Schnalle Cobra - Tragfähigkeit 9 kN (917 kgf) aus Aluminiumlegierung 7075
- Heberinge – Tragfähigkeit 45kN
- Beingurte für erhöhten Komfort

XT Floating Artikel-Nr. XT FLOATING

ENTHÄLT: 1 Board aus Kohlefaser, 1 Kit floating, 1 QHI, 1 dreieckige Kopffixierung, 1 spezifischer Transportsack.

Xt Floating ist ein Kit, das entwickelt wurde, um eine extreme Wendigkeit und Zuverlässigkeit während der Wasserrettung zu gewährleisten.

Der Schwimmer unter dem Kopf und die beiden seitlichen Schwimmer gewährleisten eine optimale Abstützung des Patienten, verhindern das Umkippen und schützen vor zufälligen Stößen.

Die schwimmenden Rohre aus halbstarrem Polyurethan wurden so verlegt, dass **der Kopf des Patienten aus dem Wasser gehalten wird.**

Der Auftrieb ist höher als der einer Schwimmweste.

Dank der **FAST CLIP**-Technologie können Sie das Floating-System in wenigen Sekunden anlegen und so die Rettungsaktionen im Wasser erheblich beschleunigen.

Die QHI-B Kopffixierung ermöglicht dem Sanitärer eine effektive Fixierung des Schädels und der Halswirbelsäule des Patienten.



XT Artikel-Nr. XT FLOATING



1 XT BOARD AUS KOHLEFASER
Artikel-Nr. 10-1600-001




1 KIT FLOATING
4 Bewegungsringe,
3 schwimmende Rohre,
2 Querhaltebinden (gelb und rot),
1 Längshaltebinde
Artikel-Nr. KIT FLOATING



1 TRANSPORTSACK XT FLOATING
Artikel-Nr. 10-1605-002



**1 QHI, 1 DREIECKIGE KOPFFIXIERUNG,
1 BAND AUS NEOPREN**
Artikel-Nr. QHI-B-N

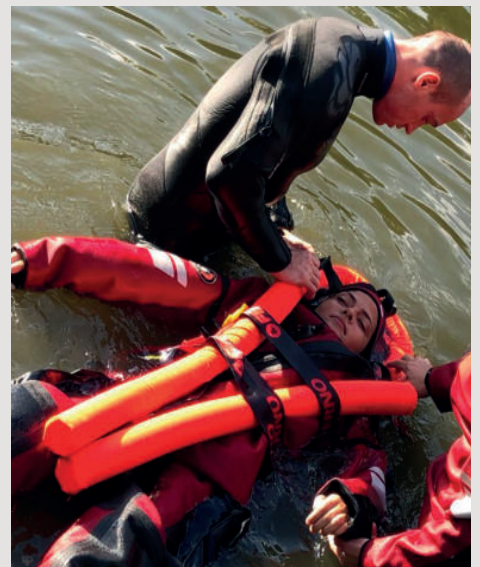

XT

ART.-NR.

BESCHREIBUNG

XT PLUS-B

XT

1 Board aus Kohlefaser, 1 Set klassische Gurte, 1 QHI, 1 dreieckige Kopffixierung, 1 Transportsack, 1 Set Stützkragen (3 Stck.)

XT PRO

XT + KIT PRO

1 Board aus Kohlefaser, 1 Set Pro Gurte, 1 QHI, 1 Transportsack, 1 dreieckige Kopffixierung

XT FLOATING

XT + KIT FLOATING

1 Board aus Kohlefaser, 1 Set Floating Gurte, 1 QHI, 1 dreieckige Kopffixierung, 1 Floating Transportsack

WICHTIG: Wenn Sie bereits ein XT haben, können Sie es mit den entsprechenden Kits auf die PRO-Version oder die FLOATING-Version nachrüsten.

KIT PRO



KIT PRO

4 Gurte mit Schnalle Cobra, 2 Bewegungsringe, 2 Polsterungen für Gurte (Beingurte), 1 Karabinerhaken, 1 Hebeband

ARTIKEL-NR. KIT PRO

KIT FLOATING



KIT FLOATING

4 Bewegungsringe, 3 schwimmende Rohre, 2 Querhaltebinden (gelb und rot), 1 Längshaltebinde

ARTIKEL-NR. KIT FLOATING

XT

ERSATZTEILE

Beschreibung	Artikelnummer
Dreieckige Kopffixierung und Band für Hals (inkl.: schwarzem Transportsack)	QHI-B-N
Kinnband für QHI	25-0601-002
Dreieckige Kopffixierung aus Neopren	038245211
Set 4 Gurte, Kunststoffschnalle (XT Standard)	25-0500-00
Aufbewahrungs- und Transportsack (XT & XT Pro)	10-1605-001
Floating Aufbewahrungs- und Transportsack	10-1605-002

TECHNISCHE DATEN - XT

Länge	830 mm
Breite	300 mm
Höhe	60 mm
Gewicht	2 kg
Tragfähigkeit	160 kg

TECHNISCHE DATEN - XT Pro (XT + Kit PRO)

Länge	830 mm
Breite	300 mm
Höhe	60 mm
Gewicht	3,4 kg
Tragfähigkeit	160 kg

TECHNISCHE DATEN - XT Floating (XT + Kit Floating)

Länge	1200 mm
Breite	350 mm
Höhe	110 mm
Gewicht	3,3 kg
Tragfähigkeit	160 kg

***Italien***

Ferno S.r.l.
P +39 (0)516860028
info.it@ferno.com
www.ferno.com

Schweiz

Ferno S.r.l.
P +41 (0)412596000
info.ch@ferno.com
www.ferno-schweiz.ch

