

LINEA XT

Estricatori per ogni tipo di ambiente



Rel. 23092025


XT

XT

cod. Kit XT PLUS-B

CONTIENE: n°1 Tavola in carbonio, n°1 Set cinture classiche, n°1 QHI, n°1 Sacca di trasporto,
n°1 Set collari Wiz Loc (3 Pezzi), n°1 Triangolo fermacapo


XT

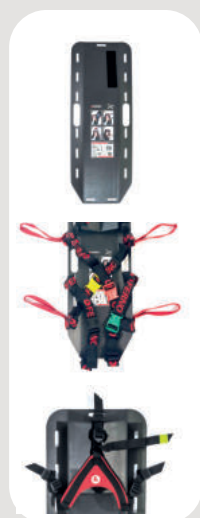cod. Kit XT PLUS-B

n°1 tavola in carbonio
TAVOLA IN CARBONIO XT
cod. 10-1600-001

n°1 Set cinture
SET CINTURE CLASSICHE
cod. Fibbia gialla. 10-1602-002
cod. Fibbia nera. 10-1604-002
cod. Fibbia verde. 10-1603-002
cod. Fibbia rossa. 10-1601-002

n°1 QHI, triangolo fermacapo, fascia in neoprene
QHI, TRIANGOLO FERMACAPO, FASCIA IN NEOPRENE
cod. QHI-B

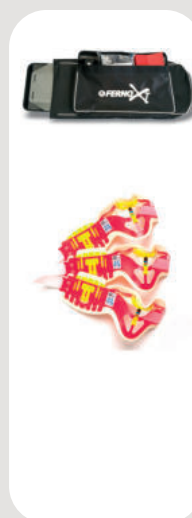

n°1 sacca di trasporto
SACCA DI TRASPORTO XT
cod. 10-1605-001

n°1 Set collari Wiz Loc
CONTENENTE 3 PZ
cod. 0822074



XT

Ferno XT: Tempi di intervento ridotti, utilizzabile da qualsiasi operatore grazie alla semplicità e alla rapidità di utilizzo, immobilizzazione completa del rachide cervicale, massima leggerezza e trasportabilità.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Studiato per l'immobilizzazione spinale e **l'estricazione in sicurezza di pazienti da veicoli o da spazi confinati**.
- Può essere utilizzato per il soccorso tecnico in ambienti impervi (acquatici e montani), grazie ai kit Pro e Floating.
- Realizzato per affrontare le operazioni di **estricazione rapida** e di **estricazione cautelativa** in maniera sicura per l'operatore.
- Le **4 cinture di sicurezza**, due toraciche in configurazione ad "X" e due inguinali, consentono di immobilizzare il paziente evitando compressioni e garantendo il massimo comfort e sicurezza.
Le fibbie sono di colori diversi per un' immediata individuazione e una rapida applicazione.
- Le **4 maniglie rosse** di sollevamento e di trasporto permettono una presa salda ed ergonomica da parte dell'operatore consentendo di estrarre il paziente in maniera più efficace.
- Il **fermacapo QHI-B** Quick Head Immobilizer garantisce all'operatore l'immobilizzazione efficace del distretto cranio-cervicale del paziente, grazie alla combinazione con il triangolo fermacapo in neoprene.
- Massima leggerezza grazie alla struttura in fibra composita di carbonio.
- Sempre pronto all'uso e trasportabile nella pratica borsa da trasporto.
- Facilmente igienizzabile.
- Compatibile con barelle atraumatiche, tavole spinali e materassi a depressione.

NATO NUMBER:

XT COMPLETE-B

6530150200590

XT PRO

6530150200591

XT FLOATING

6530150200592

XT

ATTENZIONE: Se hai già un XT, puoi aggiornarlo alla versione PRO grazie all'apposito Kit.

XT Pro cod. XT PRO

CONTIENE: n°1 Tavola in carbonio, n°1 Kit Pro, n°1 QHI, n°1 Sacca di trasporto, n°1 Triangolo fermacapo.

Il kit human lift permette il recupero verticale in ambienti confinati.

Il dispositivo mantiene la postura del paziente sulla linea di recupero riducendo notevolmente lo spazio di movimentazione.

La velocità di configurazione è garantita dalla singola fettuccia che semplifica il sollevamento del paziente.

Il fermacapo QHI-B Quick Head Immobilizer garantisce all'operatore di immobilizzare efficacemente il distretto cranio-cervicale del paziente.

XT cod. XT PRO



n°1 tavola in carbonio
TAVOLA IN CARBONIO XT
cod. 10-1600-001



n°1 Kit Pro
CONTIENE:
n°4 cinture con fibbia cobra,
n°2 anelli di movimentazione,
n°2 imbottiture per cinture (cosciali),
n°1 Moschettone,
n°1 Fettuccia di sollevamento
cod. KIT PRO




n°1 sacca di trasporto
SACCA DI TRASPORTO XT
cod. 10-1605-001



n°1 QHI, triangolo fermacapo,
fascia in neoprene
**QHI, TRIANGOLO FERMACAPO,
FASCIA IN NEOPRENE**
cod. QHI-B-N

Human LIFT

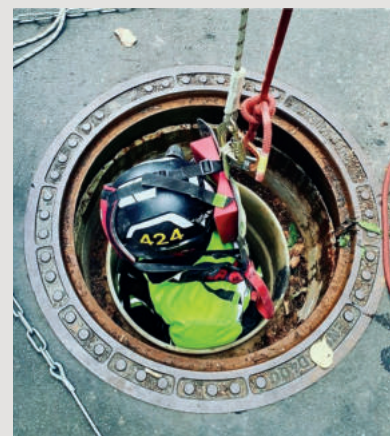

- Sistema cinture testato in accordo con la EN1498
- Fibbie cinture cobra - portata 9 kN (917 kg) in lega di alluminio 7075
- Anello di sospensione con portata 45 kN
- Cosciali per garantire un maggiore comfort

XT

XT Floating cod. XT FLOATING

CONTIENE: n°1 Tavola in carbonio, n°1 Kit floating, n°1 QHI, n°1 Triangolo fermacapo, n°1 Sacca di trasporto dedicata.

Xt floating è un kit realizzato per garantire estrema manovrabilità ed affidabilità durante il soccorso in acqua.

Il galleggiante di testa e i due galleggianti laterali, garantiscono un supporto ottimale al paziente, impedendone il ribaltamento e proteggendolo da urti accidentali.

La disposizione dei tubi di galleggiamento in poliuretano semirigido, è studiata per **mantenere il paziente con il capo fuori dall'acqua.**

La spinta di galleggiamento è superiore a quella di un giubbotto di galleggiamento. Grazie alla tecnologia **FAST CLIP** possiamo agganciare in pochi secondi il sistema di galleggiamento velocizzando sensibilmente le operazioni di soccorso in acqua.

Il fermacapo QHI-B Quick Head Immobilizer garantisce all'operatore di immobilizzare efficacemente il distretto cranio-cervicale del paziente.



XT cod. XT FLOATING



n°1 tavola in carbonio
TAVOLA IN CARBONIO XT
cod. 10-1600-001



n°1 Kit Floating
CONTIENE:
n°4 anelli di movimentazione,
n°3 tubi di galleggiamento,
n°2 Cinture di contenimento
trasversale (Gialla e Rossa),
n°1 Cintura di contenimento
longitudinale


cod. KIT FLOATING



n°1 sacca di trasporto
**SACCA DI TRASPORTO XT
FLOATING**
cod. 10-1605-002



n°1 QHI, triangolo fermacapo,
fascia in neoprene
**QHI, TRIANGOLO FERMACAPO,
FASCIA IN NEOPRENE**
cod. QHI-B-N

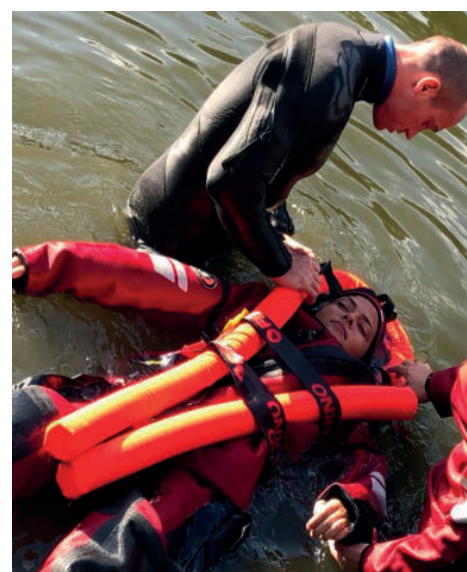

XT

CODICE

DESCRIZIONE

XT PLUS-B

XT
n°1 Tavola in carbonio, n°1 set cinture classiche, n°1 QHI,
n°1 Triangolo fermacapo, n°1 Sacca di trasporto,
n°1 Set collari Wizloc (3 pz)

XT PRO

XT + KIT PRO
n°1 Tavola in carbonio, n°1 set cinture pro, n°1 QHI,
n°1 Sacca di trasporto, n°1 Triangolo fermacapo

XT FLOATING

XT + KIT FLOATING
n°1 Tavola in carbonio, n°1 set cinture floating, n°1 QHI,
n°1 Triangolo fermacapo, n°1 Sacca di trasporto floating

ATTENZIONE: Se hai già un XT, puoi aggiornarlo alla versione PRO o alla versione FLOATING grazie agli appositi kit.

KIT PRO



KIT PRO

COD. KIT PRO

n°4 cinture con fibbia cobra, n°2 anelli di movimentazione,
n°2 imbottiture per cinture (cosciali), n°1 Moschettone,
n°1 Fettuccia di sollevamento

KIT FLOATING



KIT FLOATING

COD. KIT FLOATING

n°4 anelli di movimentazione, n°3 tubi di galleggiamento,
n°2 fasce di contenimento trasversale (Gialla e Rossa),
n°1 Fascia di contenimento longitudinale

XT

RICAMBI

Descrizione	Codice
Fermacapo con triangolo e fascia per collo (Incl. borsina nera)	QHI-B-N
Mentoniera per QHI	25-0601-002
Triangolo fermacapo in neoprene	038245211
Set 4 cinture, fibbia in plastica (XT standard)	25-0500-00
Borsa per stoccaggio e trasporto (XT & XT Pro)	10-1605-001
Borsa per stoccaggio e trasporto Floating	10-1605-002

SPECIFICHE TECNICHE XT

Lunghezza	830 mm
Larghezza	300 mm
Altezza	60 mm
Peso	2 kg
Capacità di carico	160 kg

SPECIFICHE TECNICHE XT Pro (XT + Kit PRO)

Lunghezza	830 mm
Larghezza	300 mm
Altezza	60 mm
Peso	3,4 kg
Capacità di carico	160 kg

SPECIFICHE TECNICHE XT Floating (XT + Kit floating)

Lunghezza	1200 mm
Larghezza	350 mm
Altezza	110 mm
Peso	3,3 kg
Capacità di carico	160 kg

