



Neuartige Einrichtung für die Extrikation und Wirbelsäulen-Immobilisation. Hergestellt, um die Schwierigkeiten der Rettung aus Situationen mit wenig Platz zu überwinden und dabei die Wirbelsäule des Patienten zu schützen. Dank ihrer Einsatzweise ist die Einrichtung beachtlich schneller anzubringen und gleichzeitig wirksamer.

SICHERHEIT

Die Festigkeit und die Leichtigkeit des Kohlenstoffs ermöglichen eine schnelle und sichere Extrikation auch bei der Rettung aus kritischen und Situationen mit wenig Platz.


EINFACHE ANWENDUNG

Die farbigen Gurte erleichtern und beschleunigen die Immobilisation des Patienten.

EXTRIKATION IN WENIGER ALS 20 SEKUNDEN

XT = BOARD AUS KOHLENSTOFF + SET KLASSISCHE GURTE+ QHI + TRANSPORTTASCHE + HALSSTÜTZKRAUSEN WIZ LOC (3 STCK.)

Art.-Nr. Kit XT PLUS-B

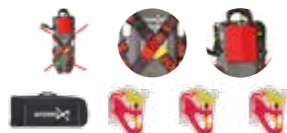

SCHNALLE COBRA

Tragfähigkeit 9 kN (917 kgf) — Aluminiumlegierung 7075

BEINGURTE



LOOPER DY

Tragfähigkeit in **22 Kn**



Human LIFT



► GURTSYSTEM GEMÄSS EN1498 GETESTET



Das Kit HUMAN LIFT ermöglicht die vertikale Bergung bei engen Gegebenheiten. Die orrichtung bewahrt die korrekte Haltung des Patienten auf der Bergungslinie und erfordert erheblich weniger den Platz für die Bewegungen. Die schnelle Konfiguration ist durch den einzelnen Handgriff gewährleistet, der die Hebung des Patienten erleichtert.

XT Pro = XT + QHI + TRANSPORTTASCHE + HALSSTÜTZKRAUSEN WIZ LOC (3 STCK.) + TRANSPORTTASCHE (SIEHE BILD AUF DER RÜCKSEITE)


Art.-Nr. XT PRO



Xt Floating ist ein Kit, das entwickelt wurde, um eine extreme Wendigkeit und Zuverlässigkeit während der Wasserrettung zu gewährleisten. Der Schwimmer unter dem Kopf und die beiden seitlichen Schwimmer gewährleisten eine optimale Abstützung des Patienten, verhindern das Umkippen und schützen vor zufälligen Stößen.

SCHWIMMEN

Die schwimmenden Rohre aus halbstarrem Polyurethan wurden so verlegt, dass der Kopf des Patienten aus dem Wasser gehalten wird. Der Auftrieb ist höher als der einer Schwimmweste.

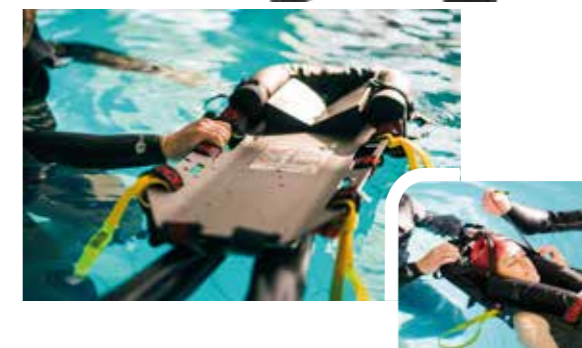

Schnellverschlussystem der Schwimmer dank der **FAST CLIP** Verschlüsse.

FAST CLIP



XT Floating = XT FLOATING = XT + QHI + FLOATING-GURTE + TRANSPORTTASCHE (SIEHE BILD AUF DER RÜCKSEITE)

Art.-Nr. XT Floating

Technische Merkmale



XT

BOARD AUS KOHLENSTOFF + SET KLASSISCHE GURTE + QHI + TRANSPORTTASCHE + HALSSTÜTZKRAUSEN WIZ LOC (3 STCK.)

Breite	300mm
Länge	830mm
Höhe	*60mm
Gewicht (komplett mit Zubehör)	2Kg
Belastbarkeit	160Kg

* Höhe einschließlich Gurte

XT Pro

XT + KIT PRO

Breite	300mm
Länge	830mm
Höhe	*60mm
Gewicht (komplett mit Zubehör)	3,4Kg
Belastbarkeit	160Kg

* Höhe einschließlich Gurte

XT Floating

XT + KIT FLOATING

Breite	350mm
Länge	1200mm
Höhe	*110mm
Gewicht (komplett mit Zubehör)	3,3Kg
Belastbarkeit	160Kg

* Höhe einschließlich Gurte



HABEN SIE SCHON EIN XT?

DANN BRINGEN SIE ES AUF DEN NEUESTEN STAND!

Unsere Produkte wurden entwickelt um auf die neuesten Versionen aktualisiert werden zu können.

NACHSTEHEND DIE ARTIKELNUMMERN DER PRODUKTE, DIE FÜR SIE DAZU BRAUCHEN KÖNNTEN.



kit PRO

Art.-Nr. KIT PRO

Inhalt: 4 Gurte mit Schnalle Cobra
2 Bewegungsringe
2 Polsterungen für Gurte (Beingurte)
1 Karabinerhaken
1 Hebehandgriff



kit FLOATING

Art.-Nr. KIT FLOATING


Inhalt: 4 Bewegungsringe
3 schwimmende Rohre
2 Querhaltebinden
1 Längshaltebinde



Italy

P +39 051 6860028
F +39 051 6861508
info@ferno.it

www.ferno.it

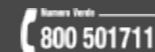

Schweiz

P +41 41 259 60 00
info@ferno-schweiz.ch

www.ferno-schweiz.ch



Extrikation
für profis

