



Dispositif médical révolutionnaire pour l'extraction et l'immobilisation dorsale. Réalisé pour faire face aux difficultés rencontrées dans des espaces réduits, aux fins de protection de la colonne vertébrale du patient. La modalité d'utilisation réduit de manière considérable le temps d'application tout en augmentant son efficacité.

**SÉCURITÉ**

Grâce à la rigidité et la légèreté du carbone l'extraction résulte rapide et sûre même dans des espaces réduits et en conditions complexes.

**FACILITÉ**


Les fermoirs en couleur rendent le procédé d'immobilisation du patient plus aisé et rapide.

**TEMPS D'EXTRACTION INFÉRIEUR À 20 SECONDES**



**XT =** PLANCHE EN CARBONE + Jeu de sangles classiques + QHI + Sac de transport + Colliers Wiz Loc (3PCS)

réf. Kit XT PLUS-B

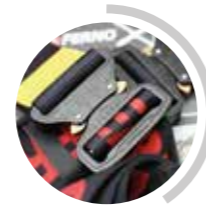

**FERMOIR COBRA**


Portée 9 kN (917 kgf)  
Alliage d'aluminium 7075

**SANGLES DE CUISSE**



**LOOPER DY**

Portée **22Kn**

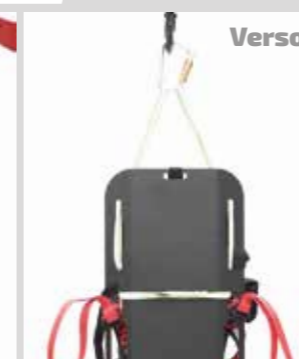
**Human LIFT**


► **SYSTÈME DE SANGLES TESTÉ, CONFORMÉMENT À LA NORME EN1498**



Le kit HUMAN LIFT permet le sauvetage à la verticale dans les espaces confinés. Le dispositif immobilise le patient dans sa posture le long de la ligne de sauvetage en réduisant l'espace de déplacement. La vitesse de configuration est maintenue par la bande individuelle rendant plus aisé le levage du patient.

**XT Pro =** XT + QHI + Sangles pro + sac de transport (VOIR PHOTO AU VERSO)

réf. XT PRO




XT Floating est un kit conçu pour assurer une maniabilité excellente et fiabilité lors du secours en eau. Le flotteur de tête et les deux flotteurs latéraux assurent un soutien optimal pour le patient, en empêchant son basculement et en le protégeant contre les chocs accidentels.

**FLOTTAISON**

L'emplacement des tubes de flottaison en polyuréthane semi-rigide a été conçu pour **maintenir la tête du patient hors de l'eau.**

La poussée de flottaison est supérieure à celle d'un gilet flottant de sauvetage.

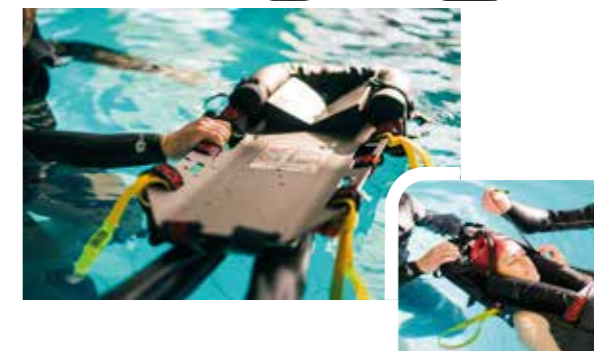

**Accrochage et décrochage rapide** des flotteurs grâce aux fermetures **FAST CLIP.**

**FAST CLIP**


**XT Floating =** XT Floating + QHI + Sangles Floating + sac de transport (VOIR PHOTO AU VERSO)

réf. XT Floating



# Spécifications techniques



## XT

PLANCHE EN CARBONE + Jeu de sangles classiques + QHI + Sac de transport + Colliers Wiz Loc (3PCS)

Largeur	300mm
Longueur	830mm
Hauteur	*60mm
Poids (accessoires inclus)	2Kg
Capacité de charge	160Kg

\* hauteur comprenant les sangles

## XT Pro

XT + KIT PRO

Largeur	300mm
Longueur	830mm
Hauteur	*60mm
Poids (accessoires inclus)	3,4Kg
Capacité de charge	160Kg

\* hauteur comprenant les sangles

## XT Floating

XT + KIT FLOATING

Largeur	350mm
Longueur	1200mm
Hauteur	*110mm
Poids (accessoires inclus)	3,3Kg
Capacité de charge	160Kg

\* hauteur comprenant les sangles



POSSÉDEZ-VOUS DÉJÀ UN **XT** ? **ACTUALISEZ VOTRE XT !**

*Nos produits sont conçus afin de pouvoir être ACTUALISÉS AUX VERSIONS LES PLUS RÉCENTES*

VOILÀ LES RÉFÉRENCES VOUS POUVANT CONVENIR



### kit PRO

réf. KIT PRO

inclut :  
4 sangles avec fermoir cobra  
2 anneaux de déplacement  
2 rembourrages pour sangles (de cuisse)  
1 mousqueton  
1 bande de levage



### kit FLOATING

réf. KIT FLOATING

inclut :  
4 anneaux de déplacement  
3 tubes de flottaison  
2 bandes d'immobilisation transversale  
1 bande d'immobilisation longitudinale



#### Italy

P +39 051 6860028  
F +39 051 6861508  
info@ferno.it

www.ferno.it



#### Schweiz

P +41 41 259 60 00  
info@ferno-schweiz.ch

www.ferno-schweiz.ch



Extraction  
pour professionnels

