



Rivoluzionario presidio per l'estricazione e immobilizzazione spinale. Realizzato per affrontare le difficoltà in ambienti ristretti, tutelando la colonna vertebrale del paziente. Il modo d'uso riduce sensibilmente il tempo di applicazione aumentandone nel contempo l'efficacia.

**SICUREZZA**

La rigidità e la leggerezza del carbonio permettono una rapida e una sicura estricazione anche in spazi ristretti e in condizioni difficili.


**SEMPLICITÀ**

Le fibbie colorate facilitano e velocizzano il processo di immobilizzazione del paziente.

**ESTRICAZIONE IN MENO DI 20 SECONDI**

**XT =** TAVOLA IN CARBONIO + Set cinture classiche + QHI + Sacca di trasporto + Collari Wiz Loc (3PZ)

**cod. Kit XT PLUS-B**

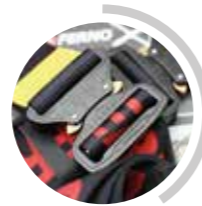

**FIBBIA COBRA**

Portata 9 kN (917 kgf)  
Lega di alluminio 7075

**COSCIALI**



**LOOPER DY**

Portata **22Kn**


**Human LIFT**


**Retro**



► SISTEMA CINTURE TESTATO IN ACCORDO CON LA **EN1498**



Il kit HUMAN LIFT permette il recupero verticale in ambienti confinati. Il dispositivo mantiene la postura del paziente sulla linea di recupero riducendo notevolmente lo spazio di movimentazione. La velocità di configurazione è garantita dalla singola fettuccia che semplifica il sollevamento del paziente.

**XT Pro =** XT + QHI + Cinture pro + sacca trasporto (VEDI FOTO RETRO)


**cod. XT PRO**



Xt floating è un kit realizzato per garantire estrema manovrabilità ed affidabilità durante il soccorso in acqua. Il galleggiante di testa e i due galleggianti laterali, garantiscono un supporto ottimale al paziente, impedendone il ribaltamento e proteggendolo da urti accidentali.

**GALLEGGIAMENTO**

La disposizione dei tubi di galleggiamento in poliuretano semirigido, è studiata per **mantenere il paziente con il capo fuori dall'acqua**. La spinta di galleggiamento è superiore a quella di un giubbotto di galleggiamento.

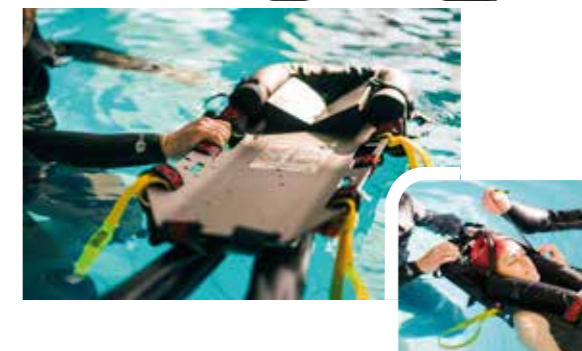

**Aggancio e sgancio rapido** dei galleggianti grazie alle chiusure **FAST CLIP**.

**FAST CLIP**


**XT Floating =** XT + QHI + Cinture Floating + sacca trasporto (VEDI FOTO RETRO)

**cod. XT Floating**

**cod. XT Floating**

# Specifiche tecniche



## XT

TAVOLA IN CARBONIO + Set cinture classiche + QHI + Sacca di trasporto + Collari Wiz Loc (3PZ)

Larghezza	300mm
Lunghezza	830mm
Altezza	*60mm
Peso (completo di accessori)	2Kg
Capacità di carico	160Kg

\* altezza comprensiva di cinture

## XT Pro

XT + KIT PRO

Larghezza	300mm
Lunghezza	830mm
Altezza	*60mm
Peso (completo di accessori)	3,4Kg
Capacità di carico	160Kg

\* altezza comprensiva di cinture

## XT Floating

XT + KIT FLOATING

Larghezza	350mm
Lunghezza	1200mm
Altezza	*110mm
Peso (completo di accessori)	3,3Kg
Capacità di carico	160Kg

\* altezza comprensiva di cinture



## HAI GIÀ UN XT? AGGIORNALO!

I nostri prodotti sono progettati per essere AGGIORNABILI ALLE ULTIME VERSIONI

ECCO I CODICI CHE POSSONO FARE AL CASO TUO



### kit PRO

cod. KIT PRO

comprende: 4 cinture con fibbia cobra  
2 anelli di movimentazione  
2 imbottiture per cinture (cosciali)  
1 moschettone  
1 fettuccia di sollevamento



### kit FLOATING

cod. KIT FLOATING

comprende: 4 anelli di movimentazione  
3 tubi di galleggiamento  
2 fasce di contenimento trasversale  
1 fascia di contenimento longitudinale



#### Italy

P +39 051 6860028  
F +39 051 6861508  
info@ferno.it

www.ferno.it



#### Schweiz

P +41 41 259 60 00  
info@ferno-schweiz.ch

www.ferno-schweiz.ch



Estricazione per professionisti

